


Comment activer le partage des données sur *glookoXT*?


1 Le patient active le partage des données **Étape Patient**

Option 1 - Depuis **EkiYou®** après la saisie du code de prescription

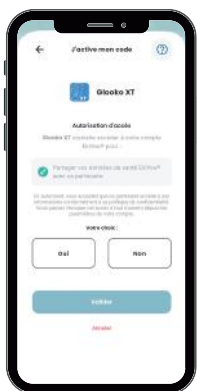

Option 2 - Depuis sa plateforme Glooko XT: dans "Téléchargement", puis "Synchronisation", le patient clique sur "EkiYou®" et se connecte à son compte.

Depuis l'application mobile Glooko XT: dans "Appareils" puis "Ajouter un appareil", le patient clique sur le bouton "Calculateur de bolus", puis EkiYou® et se connecte à son compte.

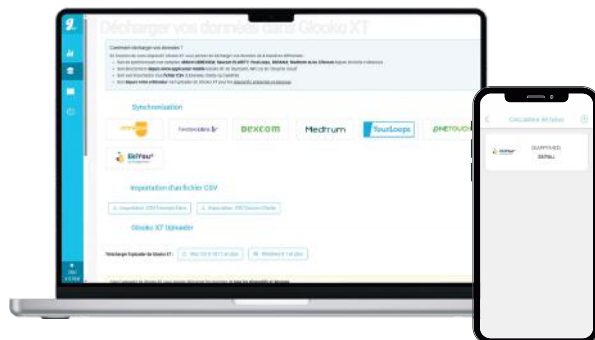

2 Vous avez accès aux données

Les données du patient (doses d'insuline et données associées : glycémies, glucides, paramètres de bolus et activité physique) se synchronisent automatiquement dans le dossier patient.

3 Télésurveillance

Vous pouvez, si nécessaire, prescrire la télésurveillance sur Glooko XT.

Support Glooko XT

✉ support-xt@glooko.com ☎ 0805 381 380 (lundi au vendredi de 9h00 à 17h00), appel gratuit

Support DiappyMed

✉ ekiyou@diappymed.com ☎ 04 11 93 88 06 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)

Ekiyou est un dispositif médical de classe IIa marqué CE (1912), lire attentivement les instructions d'utilisation disponible via : <https://diappymed.com/ekiyou001ifuj/>. Ce contenu est promotionnel - Ext_U_FR_Ekiyou_MemoPrescriptionGlookoXT_170926_V01


Glooko XT® est un dispositif médical de classe IIa marqué CE utilisé pour le suivi des données relatives au diabète par les personnes atteintes de diabète et leur équipe soignante. Glooko XT® fournit des informations facilitant le diagnostic des patients par les équipes soignantes et leur permet de pratiquer un suivi médical à distance grâce à la télésurveillance. Ce dispositif médical numérique de télésurveillance bénéficie d'un remboursement par l'assurance maladie. Lors de l'utilisation du dispositif médical, lire attentivement les instructions d'utilisation. Fabricant : Glooko Inc. 579 University Avenue Palo Alto, CA 94301 USA



EkiYou®
by DiappyMed

Guide de prescription et partage des données

glookoXT

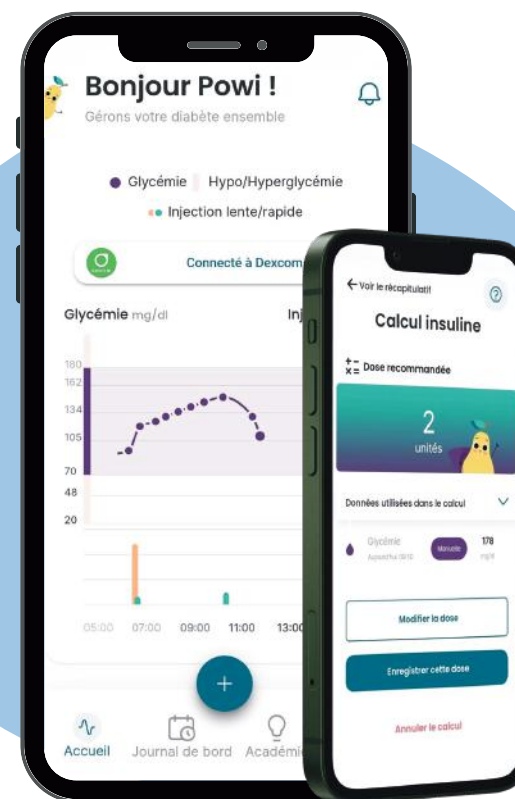


Prescrire EkiYou® via la plateforme *glookoXT*®

1

Connectez vous à votre compte *glookoXT*


- Ouvrez la fiche du patient concerné
- Rendez-vous dans l'onglet "Documents/Prescriptions"
- Cliquez sur "Nouveau document"

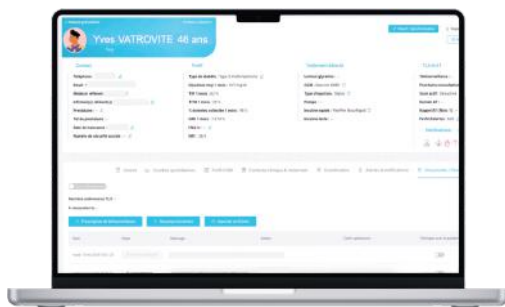

2

Sélectionnez "Thérapie digitale EkiYou", puis sélectionnez l'une des prescriptions

- Primo-prescription - Thérapie digitale EkiYou® Abonnement 3 mois
- Thérapie digitale EkiYou® Abonnement 6 mois (dans le cadre d'un renouvellement)
- Cliquez sur "Enregistrer" pour créer l'ordonnance et la transmettre automatiquement à DiappyMed (qui enverra le code au patient)

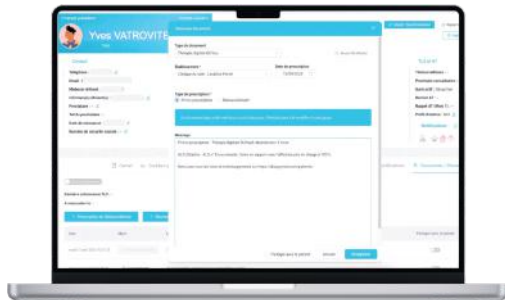

3

Le patient active son accès

- Il reçoit un email d'activation contenant un code
- Le patient télécharge **EkiYou** depuis les stores, créer un compte puis saisi ce code directement dans **EkiYou**®

Étape Patient

